

Aktualizácia modulov pre eZdravie (eRecept v5, eVyšetrenie v6)

Nevyhnutnou podmienkou pre aktualizáciu modulov pre **eZdravie** je, aby na počítači bol nainštalovaný program **APEX2017** verzia **5.0.1.7** a moduly eRecept v4 a eVyšetrenie v5. Jednotlivé moduly eZdravie komunikujú pomocou internetu s ZP (modul eRecept) a NZIS (modul eVyšetrenie). **Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola pred inštaláciou eZdravie nainštalovaná čítačka elektronických kariet ePZP dodaná NCZI, aktivovaný preukaz zdravotníckeho pracovníka, nainštalovaná čítačka kariet eID (občianskych preukazov) dodaná NCZI a nainštalovaná VPN (virtuálna privátna sieť Cisco AnyConnect).** Postup inštalácie čítačiek a potrebný inštalčný balíček (*InstallEzdravie.exe*) je prístupný na internetovej stránke NCZI (<https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/zdravotnickyy-pracovnik/uvod>) alebo na stránke www.medivox.sk. V prípade problémov pri inštalácii čítačiek, VPN alebo aktivovaní karty zdravotníckeho pracovníka poskytuje NCZI aj pomoc na diaľku cez program TeamViewer (potrebný program *C:\MEDIVOX\APEX2017\Teamviewer.exe*). Inštalácia eZdravie pozostáva z nainštalovania nových programových modulov do adresára „**C:\MEDIVOX\..**“. Súčasťou aktualizácie (posledný krok) je aj prevod databázy z modulu eRecept v4 a eVyšetrenie v5.

Pracovný postup


- ✓ Ukončíte všetky bežiacie programy vo Windows. Ak bol na počítači pred inštaláciou spustený program eRecept alebo eVyšetrenie, je potrebné ukončiť aj modul pre komunikáciu s NZIS.
- ✓ Spustíte aktualizáciu programu pomocou *setup.exe*. Vyberte pevný disk, na ktorom je nainštalovaný program APEX2017. Aktualizácia prebehne štandardne do adresára „**MEDIVOX\..**“. Pri prvom spustení aktualizácie prevedte aj prevod databáz pre eRecept v5 a eVyšetrenie v6.
- ✓ Pred spustením eVyšetrenie v6 skontrolujte inštaláciu čítačky eID kariet (použitie čítačky je voliteľná voľba).

Ukončenie modulu pre komunikáciu s NZIS

Ak bol na počítači pred opakovanou inštaláciou spustený program eRecept alebo eVyšetrenie je potrebné ukončiť aj modul pre komunikáciu s NZIS. Spustený modul indikuje ikona v pravom dolnom rohu obrazovky.



Po kliknutí pravým tlačítkom počítačovej myšky na ikonu bežiacého modulu sa zobrazí ponuka pre ukončenie činnosti modulu. Potvrďte voľbu **Koniec**.

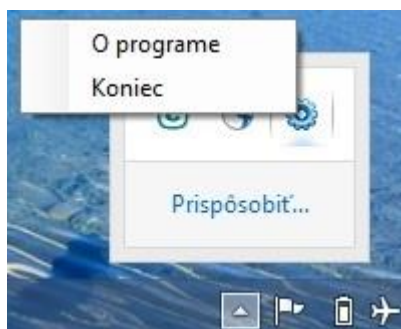

Inštalácia čítačky eID kariet (Reiner SCT)

Inštalácia pozostáva z inštalácie ovládača pre čítačku Reiner SCT, aktualizácie firmware čítačky pre slovenčinu a inštalácie aplikácie pre overenie prítomnosti pacienta (AplikáciaPPP). Potrebné inštalčné balíčky sú prístupné na stránke NCZI alebo MEDIVOX.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0944/404 648.